




D E N T A L

ساخت کشور انگلستان

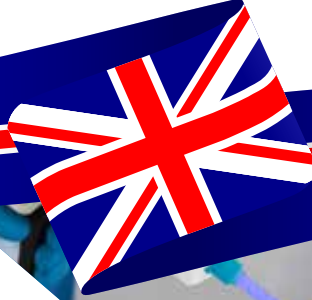

FINISHING
POLISHING



IMPRESSION
MATERIAL

BONDING
ADHESIVE
& ETCHANT



شرکت **Medicept** در سال ۲۰۰۴ به عنوان تولید کننده مواد و محصولات متنوع دندانپزشکی در انگلستان شروع به فعالیت کرد. این محصولات طیف وسیعی از مواد دندانپزشکی از ترمیم تا مدیریت بافت را در بر می گیرند. محصولات شرکت **Medicept** در انگلستان تولید و به طبع دقت و کیفیت بسیار بالایی را داشته و بیشترین بازار مصرف را در انگلستان ، اروپا و آمریکا دارند. در مجموعه متنوع و جامع محصولات شرکت **Medicept** انگلستان ، دندانپزشکان امکان انتخاب بهترین مواد حرفه ای را داشته و همیشه از نتایج کیفیت عالی آنها ، مطمئن و رضایت خواهند داشت. **شرکت توان دنت** نماینده انحصاری واردات و توزیع محصولات **Medicept** انگلستان در ایران با مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی است و تلاش دارد به روزترین مواد و با کیفیت را همیشه آماده تحویل فوری داشته باشد.



Honduras • Ethiopia • United Kingdom • Ireland • Poland • Ghana • Cyprus • Bulgaria
Bahrain • Turkey • Morocco • Italy • Greece • Philippines • Algeria • Hungary • Kenya
Albania • Libya • Nigeria • Qatar • Kuwait • Poland • UAE • Armenia • Egypt • Pakistan
Moldova • Lithuania • Indonesia • Saudi Arabia • Romania • Iraq • Uganda • Macedonia
Sri Lanka • Kosovo • Myanmar • India • Israel • Spain • Nepal • Portugal • Costa Rica

CEMENTS AND LINERS | RESTORATIVE AND FILLING MATERIALS
BONDING ADHESIVE AND ETCHANTS | IMPRESSION MATERIAL
RELINING MATERIAL | CROWN AND BRIDGE MATERIALS
FINISHING AND POLISHING | ENDODONTICS
RADIOGRAPHIC DENTAL FILM

Radiopaque Glass Ionomer Posterior Restorative Cement

سمان گلاس اینومر ترمیمی خلفی

- مناسب برای ترمیم های خلفی
- مناسب برای ترمیم کلاس I و II در بزرگسالان (بدون بار)
- مناسب برای ترمیم کلاس I و II و III و V در اطفال و سالمندان
- با حداقل میزان تحریک پالپ و دارای ضریب انبساط حرارتی نزدیک به دندان
- ساخته شده از گلاس آلومینا- سیلیکات نیمه شفاف دارای ترنسوسنسیتی عالی و ارائه حداکثر زیبایی
- استحکام عالی و دوام طولانی مدت همراه با تطابق زیبایی با دندان طبیعی
- قابل استفاده در تکنیک ART
- دارای مقاومت بالا در برابر سایش و فرسایش
- رادیوپک و قابل مشاهده در تصویر رادیوگرافی
- بدون نیاز به اچینگ یا باندینگ با عمر بالا
- رنگ بندی ویتا



Property	ISO9917-1:2007(E) Classes B&C	XtraCem-P
Working Time	-	2 mins
Net Setting Time	1.5 – 6 mins	3 mins 10 Secs

Order Number	Available-in
2006	15g Powder + 10ml Liquid

اطلاعات سفارش



Glass Ionomer Restorative Cement

سمان گلاس اینومر ترمیمی

- مناسب برای ترمیم های کلاس III و V
- ساخته شده از گلاس آلومینا- سیلیکات نیمه شفاف دارای ترنسلسنسی عالی و ارائه حداکثر زیبایی
- سهولت بالا جهت مخلوط کردن و جابجایی
- دارای مقاومت بالا در برابر سایش و فرسایش
- حداقل تحریک پالپ، استحکام عالی و دوام طولانی مدت
- دارای ضریب انبساط حرارتی نزدیک به دندان
- دارای 8 رنگ ویتا



Property	ISO9917-1:2007 Class 4.2 a	XtraCem
Working Time	-	1 min 57 Secs
Net Setting Time	1.5 – 6 mins	2 mins 32 Secs

Order Number	Available-in
2003	15g Powder + 10ml Liquid
2004	35g Powder + 20ml Liquid

اطلاعات سفارش



XtraCem-LC

Radiopaque Light-Cured Glass Ionomer Cement

سمان گلاس آینومر لایت کیور شونده

- مناسب برای ترمیم کلاس I و II و V
- مناسب ترمیم حفره های شیری
- قابل استفاده در تکنیک ART یا روش های کم تهاجمی
- مقاومت فشاری و خمشی عالی به همراه استحکام باند برشی بالا
- چسبندگی عالی به ساختار دندان
- رادیوپک و قابل مشاهده در تصویر رادیوگرافی
- دارای رنگ های A2 , A3



Order Number	Available-in
2002	12g Powder + 5ml Liquid



اطلاعات سفارش

Radiopaque Glass Ionomer Silver Reinforced Cement

سمان گلاس آینومر تقویت شده با نقره

- مناسب برای ترمیم کلاس I و II و III و V
- مناسب برای ترمیم کلاس I و II دندان های شیری
- قابل استفاده جهت بازسازی مجدد و جایگزینی ایده آل برای ترمیم های آمالگامی فیل شده
- مناسب جهت لاینینگ در زیر آمالگام و ترمیم کامپوزیت خلفی
- قابل استفاده در تکنیک ART
- دارای ذرات نقره برای افزایش استحکام
- دارای مقاومت بالا در برابر سایش و فرسایش و رادیوپاسیتی خوب
- رادیوپک و قابل مشاهده در تصویر رادیوگرافی



Property	ISO9917-1:2007 Class 4.2 c	XtraCem-S
Working Time	-	2 min 20 Secs
Net Setting Time	1.5 – 6 mins	2 mins 40 Secs

Order Number	Available-in
2005	15g Powder + 10ml Liquid

اطلاعات سفارش



Calcium Hydroxide Liner

لاینر خمیری کلسیم هیدروکساید (دایکال)

- قابل استفاده در تکنیک پالپ کپیگ مستقیم و غیرمستقیم
- قابلیت استفاده به عنوان لاینر محافظ زیر مواد پرکننده، سمان ها و ...
- مناسب درمان نکروز ها یا شکستگی های التهابی دندان
- شامل یک کاتالیزور و یک خمیر بیس
- ویژگی فلو عالی، استحکام فشاری بالا و حلالیت کم
- رادیوپک و قابل مشاهده در تصویر رادیوگرافی
- مقاومت بالا در مقابل تراکم آمالگام



Order Number	Available-in
9005	13g Base Paste + 11g Catalyst Paste

اطلاعات سفارش



Radiopaque Glass Ionomer Luting Cement

سمان گلاس آینومر لوتینگ

- قابل استفاده به عنوان بیس یا لاینینگ در زیر کامپوزیت، آمالگام و گلاس آینومر
- جهت سمان کردن کراون، بریج، اینله، آنله و براکت های ارتودنسی
- ضخامت بسیار کم و نتیجه مطلوب به دلیل داشتن ذرات کوچک تر از 5 میکرون
- حداقل تحریک پالپ، استحکام عالی و دوام طولانی مدت
- رادیوآپاسیتی مطلوب و قابل مشاهده در تصویر رادیوگرافی
- مخلوط شدن آسان و در نتیجه کاهش زمان ترمیم
- دارای مقاومت بالا در برابر سایش و فرسایش



Property	ISO9917-1:2007 Class 4.2 a	XtraLute
Working Time	> 1.5 mins	3 mins 40 Secs
Net Setting Time	1.5 – 8 mins	3 mins 35 Secs
Film Thickness	< 25 μm	17 μm

Order Number	Available-in
2003	15g Powder + 10ml Liquid
2004	35g Powder + 20ml Liquid

اطلاعات سفارش





Self-Adhesive Resin Cement

سمان رزینی سلف ادهزیو

- مناسب برای سمان کردن کراون، بریج، اینله، آنله و پست
- مناسب برای ترمیم‌هایی مبتنی بر PFM، زیرکونیا و آلومینا
- تطبیق پذیر با دوال کیور، لایت کیور و سلف کیور
- بدون نیاز به آماده‌سازی از جمله استفاده از اسید اچ، باندینگ و پرایمر
- آزادسازی فلوراید و جلوگیری از پوسیدگی ثانویه
- کاهش حساسیت حین و بعد از عمل و حداکثر تطبیق‌پذیری با کلیه ترمیم‌ها و مواد
- سرنگ اتومیکس باعث استفاده آسان و کاهش ضایعات



Order Number	Available-in
5009	7.8g/4ml Automix Dual-Barrel syringe + 10 Automix Dual-Barrel Syringe Mix Tip



اطلاعات سفارش

Polycarboxylate Cement

سمن پلی کریکسیلات

- قابل استفاده به عنوان بیس و یا لاینر برای تمامی مواد پرکننده از جمله آمالگام، کامپوزیت، و گلاس آینومر
- مناسب برای سمن و محکم کردن اینله، آنله، روکش و بریج های فلزی و سرامیکی
- قابل استفاده به عنوان خمیر پانسمن موقت
- دارای زیست سازگاری عالی همراه با افزایش استحکام مکانیکی و مقاومت در برابر فرسایش
- فاقد اسید فسفوریک و حداقل واکنش پالپ
- رادیوپک و قابل مشاهده در تصویر رادیوگرافی



Property	ISO9917-1:2007 Class 4.2 a	PolyCem
Working Time		3 mins 35 Secs
Net Setting Time	2.5 – 8 mins	5 mins
Film Thickness	< 25 μ m	15 μ m

Order Number	Available-in
2009	30g Powder + 15ml Liquid
2010	90g Powder + 30ml Liquid

اطلاعات سفارش



ZinCem

Zinc Phosphate Cement

سمان زینک فسفات

- مناسب برای سمان و محکم کردن اینله، آنله، روکش، بریج، کراون، براکت و بند ارتودنسی
- قابل استفاده به عنوان lutr لاینر برای تمامی مواد پر کننده از جمله آمالگام و کامپوزیتها
- قابلیت چسبندگی به انامل، دنتین و...
- رادیوپک و قابل مشاهده در تصویر رادیوگرافی
- فاقد اسید فسفریک و حداقل واکنش پالپ
- دارای مقاومت فشاری مناسب



Order Number

2007

2008

Available-in

30g Powder + 15ml Liquid

90g Powder + 30ml Liquid



اطلاعات سفارش

Nano Hybrid Composite

کامپوزیت نانو هیبرید

- مناسب برای دندان های قدامی و خلفی – ترمیم کلاس های I و II و III و IV و V و کوربیلد-آپ
- ایده آل برای ترمیم پرسلاین ، ونیر های کامپوزیتی و ضایعات انامل دندان
- دارای کاربرد یونیورسال و پولیش پذیری عالی جهت زیبایی
- لایت کیور و نانو هیبریدی
- رادیو اپاسیتی عالی و قابل مشاهده در تصویر رادیوگرافی
- مقاومت در برابر سایش و ثبات رنگ طولانی مدت
- میزان فیلر 83.3% ، میانگین سایز فیلر 0.8 میکرومتر
- دارای 12 رنگ ویتا



Order Number	Available-in
3004	1 x 4gm refill syringe

اطلاعات سفارش



Dual Cure Composite with Zirconium Dioxide for Core Build-ups and Post Cementation

کامپوزیت کور بیلد-آپ

- مناسب برای کور بیلد-آپ و سمان کردن پست
- کامپوزیت رزینی، دوال کیور، حاوی زیرکونیوم دی اکساید
- هیبریدی، فلو پذیر و داخل سرنگ اتومیکس
- رفتار ارتجاعی و سازگاری بسیار خوب با ساختار دندان
- دارای مقاومت خمشی و فشاری بسیار بالا
- مطابق با استاندارد DIN EN ISO 4099-DC
- دارای رنگ های A2 , A3 , Blue



Order Number	Available-in
9013	2 x 5ml/9g Syringe + 20 Mixing tips + 20 Intraoral tips



اطلاعات سفارش

Flowable Light Cure Composite

کامپوزیت فلو

- مناسب برای دندان های قدامی و خلفی - ترمیم کلاس های I و II و III و V
- مناسب برای ترمیم انامل، پرسن، سطح اکلوژال، سائیدگی های اینسیزال و...
- کاربردی به عنوان فیشورسیلانت، بیس و لاینر زیر ترمیم
- لایت کیور، دارای عمق کیور 5.5 میلی متری، حاوی عامل فلورسنت و خاصیت ارتجاعی بالا
- رادیواپاسیتی عالی و امکان مشاهده آن در تصویر رادیوگرافی
- دارای رنگ های A1 , A2 , A3 , A3.5 , A4 , OA3 , GUM



Order Number	Available-in
3005	1 x 2g Refill Syringe

اطلاعات سفارش



BOND *Plus* NT

Bonding 5 Generation Total-Etch

باندینگ نسل 5 توتال اچ

- باند تک جزئی لایت کیور
- عدم نیاز به پرایمر جداگانه
- استحکام باند بالا



Property	BOND Plus NT
Marginal seal to enamel	100%
Marginal seal to dentine	99%



Order Number	Available-in
4007	5ml Liquid

اطلاعات سفارش

BOND *Plus* SE

Bonding 7 Generation Self-Etch

باندینگ نسل 7 سلف اچ

- ویژه ترمیم های طولانی مدت و باعث کاهش زمان جراحی
- عدم نیاز به پرایمر و اسید اچ
- استحکام بالای باند فقط با یک لایه نازک
- زمان استفاده کمتر از 30 ثانیه



Order Number	Available-in
4003	6ml Liquid

اطلاعات سفارش



SoloEtch

Etching Gel

ژل اچینگ

- مناسب برای ترمیم های کلاس I تا V
- قابل استفاده جهت فیشورسیلانت، ارتودنسی، روکش های سرامیکی، ترمیم کامپوزیت رزینی و ...
- شامل 37% اسید فسفوریک آبی
- تیکسوتروپیک و به رنگ سبز روشن



Order Number	Available-in
5004	2g Syringe + 3 Tips
5005	50ml Syringe + 50 Tips + 3 Empty syringe

اطلاعات سفارش

A Silicone Impression Putty (A-Silicon) پوتی قالبگیری سیلیکونی افزایشی

- دو فاز و تک مرحله ای
- سیستم قالبگیری فقط نیازمند Putty و Wash
- قابل استفاده بدون استفاده از دستگاه میکس اتوماتیک
- کاهش زمان قالبگیری به حداقل. در مجموع 3 و نیم دقیقه



Order Number	Available-in
5010	250ml Base + 250ml Catalyst

اطلاعات سفارش

A Silicone Impression Light Body لایت بادی قالبگیری سیلیکونی افزایشی (A-Silicon)

- دو فاز و تک مرحله ای
- سیستم قالبگیری فقط نیازمند Putty و Wash
- قابل استفاده بدون استفاده از دستگاه میکس اتوماتیک
- کاهش زمان قالبگیری به حداقل. در مجموع 3 و نیم دقیقه



Order Number
5011

Available-in
2 x 50ml Cartridge + 12 Mixing tips

اطلاعات سفارش

Mono phase Impression Materials مونوفاز قالبگیری سیلیکونی مونو فاز

- تک فاز و تک مرحله ای
- مدت زمان قالبگیری در مجموع 3 و نیم دقیقه
- بسیار مقاوم در برابر پارگی با قابلیت ارتجاعی بالا
- تیکسوتروپیک بالا و دارای ثبات حجمی و ابعادی



Order Number	Available-in
9012	2 x 50ml Cartridge + 12 Mixing tips

اطلاعات سفارش



Adhesive for A Silicone (A-Silicon) سیلیکونی افزایشی

- چسب مخصوص مواد قالبگیری سیلیکونی
- چسبندگی بسیار بالا
- خشک شدن سریع



Order Number	Available-in
9001	15ml Liquid

اطلاعات سفارش

Bite Registration Material

ماده ثبت بایت

- تایم ست کردن فقط 1 دقیقه
- طعم و رایحه پرتقال با رنگ نارنجی و سفید
- تیکسوتروپیک، پایداری ابعادی بالا، حداکثر میزان سختی نهایی



Order Number	Available-in
5013	2 x 50ml Cartridge + 12 Mixing tips + 12 Conturing tips

اطلاعات سفارش



C Silicone Impression Materials Light Boy (C-Silicon) سیلیکونی تراکمی

– لایت بادی، جریان پذیری عالی، قوام کم

– هیدروفیلیک، ویژگی الاستیکی بالا



Order Number	Available-in
6011	150 ml

اطلاعات سفارش

impress activator

Catalyst
فعال کننده

– ضد حساسیت، غیر محرک، خوش طعم و بو



Order Number	Available-in
6010	60 ml

اطلاعات سفارش

C Silicone Impression Materials Putty (C-Silicon) سیلیکونی تراکمی

- مناسب برای تکنیک های یک مرحله ای و دو مرحله ای
- نوع نرم و دارای طعم و رایحه نعنا
- دارای قوام بسیار بالا، قابل ورز دادن و پایداری ابعادی



Order Number	Available-in
6009	Jar 900ml

اطلاعات سفارش



Soft Relining Silicone-Super Bond

ریلاین دائمی

- ریلاین دائمی نرم، مبتنی بر A-Silicon و کلد کیورینگ
- قابل استفاده بطور مستقیم از کارتریج به دنچر بیس
- هم رنگ لثه و دارای ایندکیتور رنگی در پرایمر به منظور چک عملکرد
- به همراه یک پرایمر و دو پولیش



Order Number	Available-in
9001	15ml Liquid



اطلاعات سفارش

Non Eugenol Temporary Cement

سمن موقت فاقد اوژنول

- سمن موقت لوتینگ بر پایه زینک اکساید فاقد اوژنول
- مناسب برای انجام سمن موقت کراون و بریج
- دارای ویژگی فلو عالی، رادیوپک و قابل مشاهده در تصویر رادیوگرافی
- قدرت چسبندگی بالا با ضخامت لایه کم و انطباق حاشیه ای (مارجینال) عالی
- مناسب بیماران دارای آلرژی شناخته شده یا حساس به اوژنول
- به دلیل فرمولاسیون بهینه از چسبندگی مواد رزینی جلوگیری نمی کند



Order Number	Available-in
9011	1 x 5ml Automix Syringe + 6 x Automix tips

اطلاعات سفارش



Prophylaxis Paste

خمیر پروفیلاکسی

– مناسب برای حذف پلاک و جرم از سطح دندان

– تیکسوتروپیک

– شامل 2 مدل Coarse و Medium

– حاوی طعم دهنده طبیعی با 4 طعم و رایحه



Order Number	Available-in
6001	Orange & Coarse grain 250g Jar
6002	Mint & Medium grain 250g Jar
6003	Strawberry & Medium grain 250g Jar
6004	Bubblegum & Medium grain 250g Jar
6005	Orange & Coarse grain 50g Jar
6006	Mint & Medium grain 50g Jar
6007	Strawberry & Medium grain 50g Jar
6008	Bubblegum & Medium grain 50g Jar

اطلاعات سفارش



Root Canal Filling Material Silver free ماده پرکننده دائمی برای کانال ریشه دندان

- سیلر پودر و رزینی، فاقد اوژنول و آکرلیک
- ورکینگ تایم: 4-6 ساعت
- ستینگ تایم: 9-15 ساعت
- رادیوپاسیتی عالی و مناسب برای تمام تکنیک های آبجوریشن
- شامل پودر: بیسموت اکساید + متیل آمین به همراه رزین: اپوکسی



Order Number	Available-in
2001	8g Powder + 10g Resin

اطلاعات سفارش



Root Canal Sealer

ماده پرکننده دائمی برای کانال ریشه دندان

- شامل دو خمیر بر پایه زینک اکساید اوژنول و دارای باریوم سولفات
- دارای رنگ روشن، عدم تیره شدن و امکان ایجاد لایه ای با ضخامت کم
- رادیوپک، فلو مطلوب و دارای نشستی و تغییر ابعاد کم
- ورکینگ تایم طولانی و مناسب حین آماده سازی



Order Number

9004

Available-in

8g Base Paste + 3.5g Accelerator Paste

اطلاعات سفارش

Glass Fiber Post پست فایبر گلاس داخل کانال

- ایده آل برای کوربیلدآپ بخصوص در دندان های قدامی و نواحی زیبایی
- ساخته شده از فایبر گلاس نوع S با مدول الاستیسیته بالا (حدود 60%)
- ماتریکس: رزین اپوکسی با درجه تبدیل بالا و دمای انتقال شیشه ای بالا (Tg)
- دارای مقاومت خمشی بسیار بالا (1500 MPa)
- مدول الاستیک خمشی بالا و متعادل (60 GPa)



Size (mm)	0#	#1	#2	#3	#4
Maximum Diameter	1.00	1.30	1.60	1.80	2.00
Point Diameter	0.56	0.65	0.72	0.88	1.04
Conicity %	0.04	0.06	0.08	0.08	0.08
Length	19	19	19	19	19

Order Number	Available-in
8005	Pack of 10 Post - Size 0,1,2,3,4
8007	Self Post Starter Kit - 3 Post each of size 0,1,2 + 1 Drill each of size 0,1,2

اطلاعات سفارش



Dental Film For Intraoral Radiography SPEED E فیلم رادیوگرافی تک دندان

- سرعت بالا (ایزو کلاس E)
- کیفیت بالای کنتراست و تعریف جزئیات
- دارای لایه محافظ دو طرفه و آنتی استاتیک
- به همراه پاکت نرم، ضد عفونی، ضد آب و ضد نور



Order Number	Available-in
9014	Pack of 150 Film

اطلاعات سفارش



**RELINING
MATERIAL
ROOT CANAL
INSTRUMENTS**



**RESTORATIVE AND
FILLING MATERIAL**
**CROWN &
BRIDGE
MATERIAL**

**FINISHING
AND
POLISHING**



Medicept

DENTAL

www.mediceptdental.co.uk



توان دنت
TAVAN DENT

تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان اسکندری، پلاک ۱۵۵ تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۲۸۳۱۴ فاکس: ۰۲۱-۶۶۹۳۹۴۹۷

No. 155, Azadi Street, Tehran, 1419934960, Iran Tel: 14 83 42 66 021 Fax: 97 94 93 66 021

واتساپ: ۰۹۱۰۵۱۵۳۳۰۵ @:tavandent info@tavandent.com